



BIOMEDICAL

F-427i

CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL

Notre design vertical est un excellent choix lorsque vous avez besoin d'une solution de stockage pour de plus grandes quantités.



-5°C
-25°C

DIMENSIONS

Dimensions extérieures HxLxP, mm	2002x595x642
Dimensions intérieures HxLxP, mm	1827x475x495
Poids brut/net, kg	99 / 85
Matériau de l'armoire intérieure	ABS
Matériau de l'armoire extérieure	Acier peint
Poids de l'emballage, kg	-
Dimensions de l'emballage HxLxP, mm	-
Épaisseur de l'isolation	50
Type d'isolation	Polyuréthane avec cyclopentane
Distribution d'air	Dynamique
Mobilité	Standard : Pieds réglables - Option : Roulettes
Réfrigérant, Type / gramme	R600a / 80
Compresseur à vitesse variable	Oui - Adaptive Cooling Technology
Nombre de sondes	2

CONTRÔLEUR

Contrôleur	i-Care, Écran tactile
Langue du contrôleur	EN, DE, FR
Connexion USB	Oui
Enregistrement	Data, Alarms & Events
Graphique de température	Oui
Alarme de température haute/basse	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Alarme de défaillance de sonde	Oui
Alarme de panne de courant	Oui

STOCKAGE

Volume, Brut/Net, L	427 / 361
Étagères, Pleines/Demi	5 / 1
Matériau de l'étagère	Aluminium perforé

CARACTÉRISTIQUES

Serrure	Oui
Lumière LED	Oui
Batterie de secours pour contrôleur	Oui
Système No-Frost™	Oui
Chauffage périmétrique	Gaz chaud
Hublot	Oui - Ø 20 mm
Contact sec	Oui
Porte	Standard: Solide
Caractéristiques de la porte	Automatique : Fermeture < 90° - Maintien de la fermeture > 90°
Réversibilité de la porte	Oui



F-427i

CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL

Notre design vertical est un excellent choix lorsque vous avez besoin d'une solution de stockage pour de plus grandes quantités.





Tension/Fréquence	Tension/Hz	230V/50-60Hz
Température ambiante maximale	°C	30°C
Humidité maximale	% rh	65%
PERFORMANCE		
Toutes les données à RT 20°C		
Plage de température	°C	-5 à -25
Uniformité des performances - différence entre le haut et le bas	°C	+/- 3.0
Temps de descente	Minutes	110 min à -20°C
Temps de maintien	Minutes	72 min à -10°C
Bruit	dB	50
Mode d'économie d'énergie	kWh/24h	3,181 kWh/24h réglé à -20
Consommation d'énergie, kWh / 24h	kWh/24h	3,773 kWh/24h réglé à -25
Énergie annuelle	kWh/annuelle	1377 kWh/y réglé à -25°
Consommation instantanée d'énergie	kW	PD 0,220/ Stabilité 0,150
Rejet de chaleur	W	260
Valeur U	W/m ² K	0.44
COMPOSANTS DE REFROIDISSEMENT		
Réfrigérant/Quantité (gramme)		R600a/80gr
Nombre de compresseurs	pcs	1
Compresseur à vitesse variable	Oui/Non	Oui
Distribution d'air interne (type de)		Flux d'air triple
Ventilateur de l'évaporateur	Oui/Non/Variable	Oui
Ventilateur du condenseur	Oui/Non/Variable	Oui
Nombre de sondes	pcs	2
Dégivrage	Oui/Non	Oui - automatique
CARACTÉRISTIQUES		
Thermostat de sécurité	o/n/optionnel	Non
Serrure	o/n	Oui
Lumière LED	o/n	Oui
Batterie de secours pour contrôleur	o/n/optionnel	Oui - 24h
Hublot	o/n - Ømm	Oui - Ø 20mm
Contact sec	o/n	Oui
Roulettes	o/n/optionnel	Optionnel
Porte	verre/solide	Solide
Fermeture de la porte	o/n/optionnel	Oui
Réversibilité de la porte	o/n	Oui
Maintien automatique à 90°C	o/n	Oui
Valve à vide	o/n	Oui
VIP (Panneau sous vide)	o/n	Non
Chauffage périmétrique		Boucle de gaz chaud



F-427i



CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL

Notre design vertical est un excellent choix lorsque vous avez besoin d'une solution de stockage pour de plus grandes quantités.

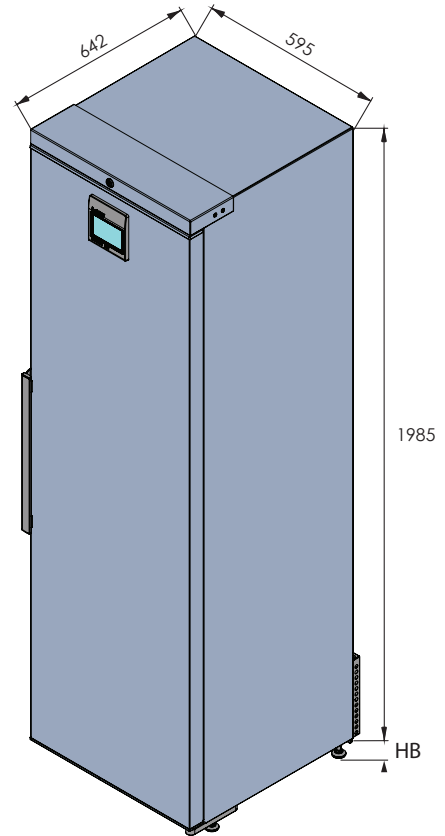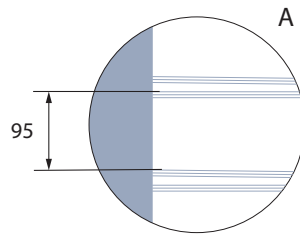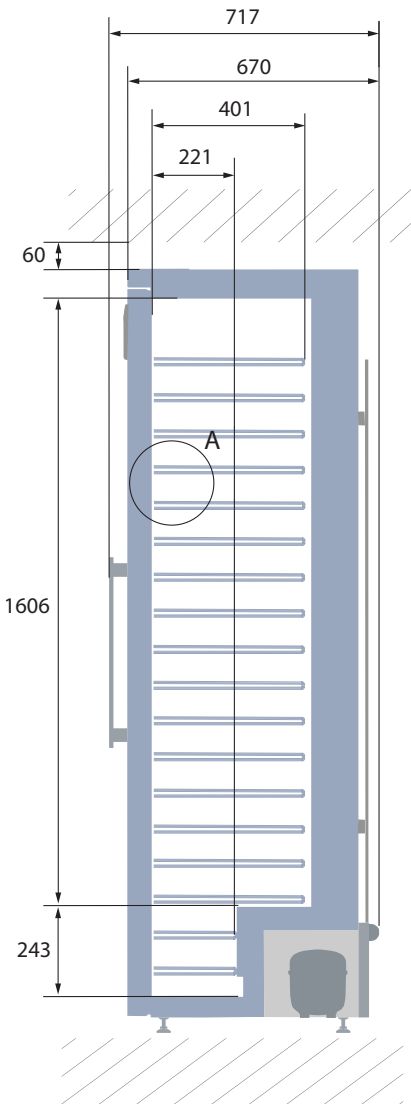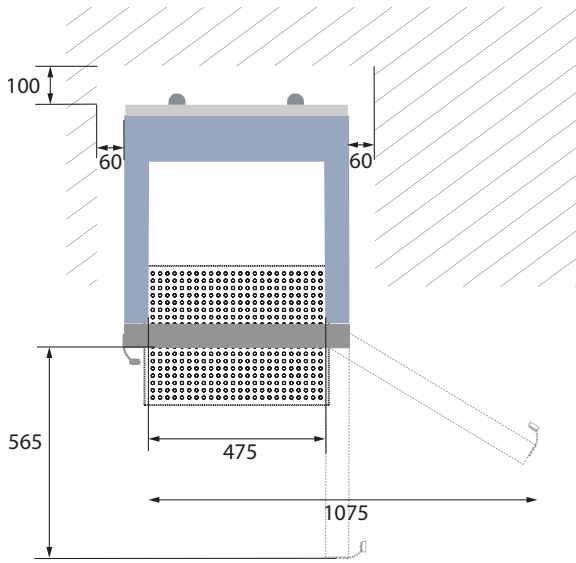

Toutes les mesures en mm

HB : Hauteur de la base
(HB est réglable lorsque la valeur donnée est xx-xx)

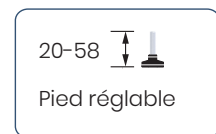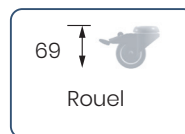




F-427i

CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL

Notre design vertical est un excellent choix lorsque vous avez besoin d'une solution de stockage pour de plus grandes quantités.

POSITION DU CAPTEUR		MODÈLE	F-427i
VUE DE FACE	VUE DE DESSUS	Type de test	Test de 15-point
		Environnement de test	Conditions contrôlées, armoire vide
		Température ambiante	20°C
		Humidité	60%
		Point de consigne	-25°C
		Capteur utilisé	25 gr laiton étamé formé en cylindre avec un diamètre de 15,2 mm
		Installation	Appareil installé selon les conditions du manuel d'instructions
		Réfrigérant	R600a

TEMPÉRATURE DU CAPTEUR															
Position du capteur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
Max	-22	-22,4	-22,9	-21,5	-22,6	-22,4	-23,5	-23,5	-22,4	-23,4	-22,6	-23,5	-23,6	-22,5	-23,5
Moy.	-22,9	-23,3	-24,1	-22,2	-23,2	-23,4	-24,3	-24,3	-23,5	-24,4	-23,6	-24,6	-24,7	-23,3	-24,6
Min.	-24	-24,6	-25,3	-23,1	-24	-24,6	-25,2	-25,3	-24,8	-25,5	-24,8	-25,9	-25,9	-24,4	-26

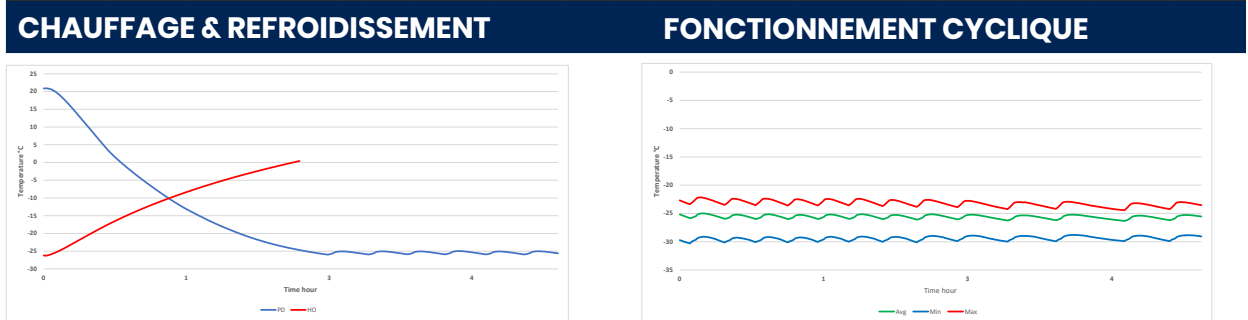

PERFORMANCE TYPIQUE À 20°C AMBIANT – ARMOIRE VIDE	
Température moyenne de l'armoire	-25,6°C
Uniformité	+/- 3,0°C
Stabilité moyenne	0,6°C
Récupération en 1 min. après ouverture de la porte à -20°C Température moyenne	15 min.
Taux de cycle marche/arrêt	19 / 3 min.
Cycle de service	84%
Consommation d'énergie - Mode normal	3,7 kWh/jour
Consommation d'énergie - Mode économie d'énergie (-20)	3,1 kWh/jour
Temps de descente à -20°C	110 min.
Temps de maintien de -25°C à -10°C	72 min.
La température de l'échantillon ne dépasse pas	-15°C
Rejet de chaleur	260